

USER GUIDE 1-10

GUIA DEL USUARIO 11-20



COMODITA

*Excellence in design and safety*

# Tipo

*stand up*

COMPACT UPRIGHT  
ROLLING WALKER

CAMINADOR VERTICAL  
COMPACTO CON  
RUEDAS



model number: COM 930



## About your COMODITÀ Tipo Stand Up Rolling Walker

COMODITÀ is a company concerned with your comfort, safety and mobility. Our products will simplify your movements, offering support and safety for your daily activities, helping you do what you want, when you want it.

The modern patented design and sturdy construction of the COMODITÀ Tipo Stand Up Rolling Walker (ref. COM 930) make it one of the safest and most stylish walkers in the market.

Built to support weights of up to 300 lbs., it is tested and approved under international testing standards for walkers and rollators.

The COMODITÀ Tipo Stand Up Rolling Walker is built with high-quality materials to ensure your safety.

In addition, the COMODITÀ Tipo Stand Up Rolling Walker comes with the exclusive COMODITÀ Pisa removable cup holder, cane holder and washable nylon shopping bag, as well as a convenient travel bag.

The COMODITÀ Tipo Stand Up Rolling Walker has two 10" aluminum front wheels, with pneumatic tires, and two 8" back wheels, also with pneumatic tires. That makes your COMODITÀ Stand Up perfect for indoor and outdoor use, on just about all kinds of surfaces.

**Please do not hesitate to contact us at [info@comoditausea.com](mailto:info@comoditausea.com) or through our website [www.comoditausea.com](http://www.comoditausea.com) if you have any problem with your COMODITÀ Stand Up. We are here to help!**

## **Main Features:**

- Extra-large 10" aluminum front wheels and 8" rear wheels with pneumatic tires, for safer indoor and outdoor use
- Wide, comfortable nylon seat
- Adjustable handle height
- Padded ergonomic backrest
- Convenient removable cup holder
- Cane holder included
- Convenient transport nylon bag
- Hand brake locks for safety while sitting
- Double-fold construction makes it very compact and easy to transport
- Four light reflectors at the front and two at the back for additional safety
- Nylon shopping bag with light reflecting straps for added security

## **Product Dimensions and Specifications**

- Unit weight: 23.5 lb (10.7 kg)
- Weight capacity: 300 lb (136 kg)
- Recommended user height: 5' to 6' (1,52 m to 1,82 m)
- Overall height: 40" / 46" (101.5 cm / 116.0 cm)
- Overall length: 28" (72 cm)
- Overall width: 25" (63.5cm)
- Folded measurements: 35"x 16"x 15"
- Front wheel diameter: 10" (25 cm)
- Back wheel diameter: 8" (20 cm)
- Seat height from floor: 21" (53 cm)
- Seat depth: 11" (28.5 cm)
- Seat width: 17½" (44 cm)
- Size of nylon bag: 17" W, 8" D, 10" H (43cm W, 20cm D, 25cm H)
- Recommended tire pressure: 20 PSI

## Assembly Instructions

Assembling your COMODITÀ Tipo Stand Up Rolling Walker is extremely simple! You can also watch the assembly video at [www.comoditauusa.com](http://www.comoditauusa.com) for more instructions.

1. Carefully remove the walker from the shipping carton.
2. Place the rollator on a flat surface



3. Raise the handles to the upright position.



4. Lock the frame on both sides by bringing the folding lock lever (pic 1 – make sure this lever is on this position) up 180 degrees, so it points up (pic 2). Turn the folding lever 90 degrees towards the back wheel, so it slides into the folding lock lever plastic support (pic 3). **Note:** You can only slide the folding lock lever into the plastic support if it is in the correct position, as seen in the pictures below.



PIC 1



PIC2



PIC 3

5. Insert both handles into the end of the backrest. Make sure the position of the backrest is correct and tighten the knobs.



6. Insert both handles into the frame of the walker and tighten the knob (see handle height adjustment below).



7. Release the plastic locking device that holds the walker folded.




8. Open the walker and lock it in the opened position by pushing down the sides of the seat onto the main frame until you hear a click.



9. Adjusting the height of the handle:

- Untighten the plastic knob on the frame.
- Adjust the handle at the desired height.
- Tight the plastic knob on the frame to lock the handle at the desired height.

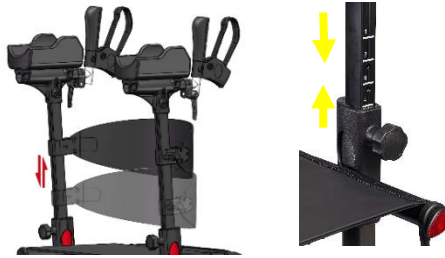

10. Adjusting the position of the handle:


- You can adjust the brake handles vertical position to your most comfortable position by unlocking the locking knob.



- You can also adjust the distance of the brake handle from the arm support.



11. Adjusting the height of the backrest:

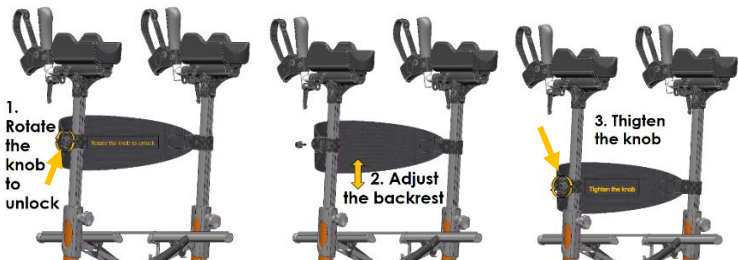

12. You will find a nylon strap on each side of the shopping bag that becomes a loop (fig 1). Locate the plastic supports on each side of the seat (Fig 2). Move the nylon strap loop around the plastic support (Fig3).



13. Secure the brake cables together in front of the walker. You will find a small Velcro strap that will allow you to tie the brake cables together.



14. Insert the cup holder into the plastic support located on the backrest.



15. Insert the cane holder into the plastic support



**IT IS THAT SIMPLE! NO TOOLS, NO LOOSE PARTS!**



## **Operating Instructions**

### **TO WALK:**

- Position yourself behind the walker and hold both handles firmly.
- Roll your walker slowly forward so that the rear wheels are a few inches ahead of your body.
- While maintaining a steady and safe roll forward, place your foot in line with the rear wheels.
- Repeat the movement with your other foot.
- To slow down, slowly squeeze the brake handles towards you.
- To lock the brakes, push forward the brake handles until the brakes “click” into locked position. Do not push it any further than this point.
- To unlock the brakes and resume walking, pull back the brake handles until you hear a “click.”

### **TO USE THE SEAT OF YOUR WALKER:**

- Make sure your walker is in a flat surface, not on an incline.
- LOCK the brakes before sitting.
- Make sure your feet rest flat on the ground.

## Care and Maintenance

### PERIODIC BRAKE ADJUSTMENT

To adjust the sensitivity of the brake:

- To tighten the brake (reduce the gap between the brake pad and wheel) rotate the adjusting nut clockwise.
- To loosen the brake (increase the gap between the brake and the wheel) rotate the adjusting nut counterclockwise.



### WARNING!

- Over adjustment of the brake might prevent the wheels from moving freely.
- Under adjustment of the brake may cause the brake pad not to engage at all.
- **DO NOT USE WALKER IF BRAKES ARE NOT WORKING PROPERLY.**

## Safety Instructions

***WARNING!!! Failure to follow safety instructions may result in serious injuries.***

- **BE CAREFUL NOT TO TIP FORWARD YOUR COMODITÀ TIPO STAND UP WALKER.**  
COMODITÀ is very concerned with the safety of our products. That is why we only offer our Stand Up model with ultra large wheels with pneumatic tires. The 12" front wheels with **pneumatic** tires will allow you to enjoy your walker in many different terrains with less risk of tipping over.
- **DO NOT** walk too fast!
- **DO NOT** push your COMODITÀ Tipo Stand Up when you find an obstacle in the terrain! Go around the obstacle. **Trying to overcome an obstacle forcefully increases the risk of the walker tipping over.**
- **DO NOT** transport someone while sitting on this walker.
- **DO NOT** exceed maximum weight capacity.
- Brakes **MUST** be on **LOCKED** position before sitting on the seat.
- **DO NOT** self-propel the walker while seated.
- **DO NOT** sit on the walker on an incline.
- **INSPECT BRAKES** before each use.
- **DO NOT** use the walker if the brakes are not working properly.
- **ALL WHEELS MUST** be in contact with the floor or ground at all times.
- **BACKREST IS NOT** intended to support your full weight. It is intended to provide back support while you are seated.
- **DO NOT** use in escalators, stairs, moving sidewalks or uneven surfaces.
- **BOTH FEET** should rest flat on the ground when sitting.
- **ALWAYS** check if the seat is locked down and well connected to the frame when the rollator is open.

## Warranty

Your COMODITÀ Rolling Walker is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase for the original owner. This warranty does not cover product failure due to user negligence, misuse of the product, failure to adhere to instructions, or normal wear and tear. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our discretion, repair or replace the product. This warranty does not include any labor or shipping charges. Please contact our customer service at [info@comoditusa.com](mailto:info@comoditusa.com). We will provide a return authorization number. You will be required to include a copy of your original bill of sale.

## Acerca de su caminador COMODITÀ Tipo Stand Up

COMODITÀ es una empresa preocupada por su confort, seguridad y movilidad. Nuestros productos simplificarán sus movimientos, ofreciendo apoyo y seguridad para sus actividades diarias, ayudándole a hacer lo que quiera, cuando quiera.

El diseño moderno patentado y la construcción robusta del Caminador Tipo Stand Up de COMODITÀ (ref. COM 900) lo hacen uno de los caminadores más seguros y estilosos del mercado.

Construido para soportar pesos de hasta 300 libras, ha sido probado y aprobado bajo estándares de prueba internacionales para caminadores.

El caminador COMODITÀ Tipo Stand Up fue construido con materiales de alta calidad para garantizar la mayor seguridad posible.

Además, COMODITÀ Tipo Stand Up viene con el exclusivo portavasos removible COMODITÀ Pisa, soporte de caña y bolsa de compras lavable de nylon.

El COMODITÀ Tipo Stand Up tiene dos ruedas delanteras de 12", que lo hace muy fácil de maniobrar. También puede doblarse fácilmente para su almacenamiento o transporte.

**Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web [www.comoditausea.com](http://www.comoditausea.com) si tiene alguna duda, pregunta, o problema. ¡Estamos aquí para ayudar!**

### **Principales características:**

- Ruedas delanteras extra grandes de 10" para uso interior y exterior más seguro
- Asiento de nylon ancho y cómodo
- Altura ajustable de la manija
- Respaldo ergonómico acolchado
- Portavasos removible
- Soporte de caña incluido
- Bolsa de nylon removible y lavable, cómoda y espaciosa
- Cerraduras de freno de mano para su seguridad mientras se sienta
- Construcción de doble pliegue lo hace muy compacto y fácil de transportar
- Cuatro reflectores de luz en la parte delantera y dos en la parte posterior para mayor seguridad
- Bolsa de nylon con cinta reflectora de luz para mayor seguridad

### **Dimensiones y especificaciones del producto**

- Peso de la unidad: 10.7 kg
- Capacidad de peso: 136 kg
- Altura recomendada del usuario: de 1.52m a 1.82m
- Altura total: 102 cm / 116 cm)
- Longitud total: 72 cm
- Anchura total: 62.5 cm
- Anchura cuando plegado: 27 cm
- Diámetro de la rueda delantera: 25 cm
- Diámetro de la rueda trasera: 20 cm
- Altura del asiento desde el suelo: 53 cm
- Profundidad del asiento: 28.5 cm
- Anchura del asiento: 44 cm
- Medidas de la bolsa de nylon: 43cm A, 20cm P, 25cm A
- Presión de neumáticos recomendada: 20PSI

## Instrucciones de montaje

¡El montaje de su caminador COMODITÀ Tipo Stand Up es extremadamente simple!

1. Retire cuidadosamente el caminador de la caja de transporte.
2. Ponga el caminador sobre una superficie plano.



3. Levante los mangos a la posición vertical



4. Bloquee el marco en ambos lados trayendo la palanca de bloqueo plegable (foto 1) 180 grados hasta que apunte hacia arriba (foto 2). Gire la palanca 90 grados hacia la rueda trasera, para que se acomode en el soporte de plástico (foto 3). **Nota:** Sólo se puede deslizar la palanca de bloqueo plegable en el soporte de plástico está en la posición correcta, como se puede ver en las fotos abajo.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

5. Inserte el soporte de la manija en ambos extremos del respaldo y apriete las perillas del respaldo.



6. Inserte ambos soportes de la manija en el marco del andador.



7. Sulte el dispositivo de bloqueo de plástico que sostiene el andador plegado.



8. Abra el caminador y bloquéelo en la posición abierta empujando hacia abajo los dos lados del asiento en el marco principal hasta que escuche un clic.





9. Ajuste de la altura del mango:

- Afloje la perilla de plástico del marco.
- Ajuste el mango a la altura deseada.
- Apriete la perilla de plástico en el marco para bloquear el mango a la altura deseada.



10. Ajuste la posición del mango:


- Puede ajustar la posición vertical de los mangos a la posición más cómoda desbloqueando la perilla de bloqueo



- También puede ajustar la distancia del mango del freno al apoyabrazos



11. Ajuste la posición del respaldo:

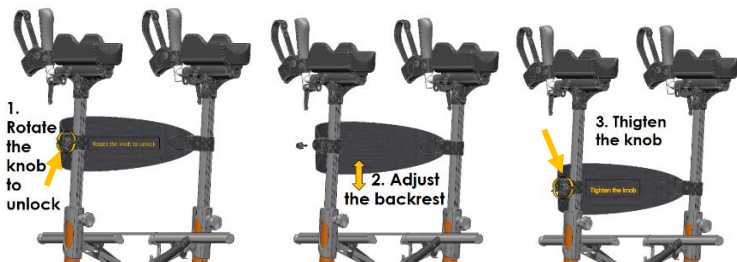

de compras que se convierte en un lazo (fig. 1).

Ubique los soportes de plástico a cada lado del asiento (Fig 2) Mueva el lazo de la correa de nailon alrededor del soporte de plástico (Fig 3)



13. Asegure los cables de freno juntos frente al andador.  
Encontrará una pequeña cinta de velcro que permitirá unir los cables de freno.



14. Introduzca el portavasos en su soporte de plástico en la lateral del caminador.



15. Insert the cane holder into the plastic support



**¡ES ASI DE SIMPLE! SIN PIECES SUeltas Y SIN HERRAMIENTAS**

## **Instrucciones de operación**

### **PARA CAMINAR:**

- Colóquese detrás del caminador y sostenga firmemente las dos manijas.
- Haga rodar el caminador lentamente hacia adelante para que las ruedas traseras estén a unas pocas pulgadas de su cuerpo.
- Manteniendo un movimiento firme y seguro hacia adelante, coloque el pie en línea con las ruedas traseras.
- Repita el movimiento con el otro pie.
- Para ralentizar, apriete lentamente los mangos del freno hacia usted.
- Para bloquear los frenos, empuje las manijas de los frenos hacia el frente del caminador hasta que los frenos hagan "clic" en la posición bloqueada. No los empuje más allá de este punto.
- Para desbloquear los frenos, levante las manijas de los frenos hasta que escuche un "clic".

### **PARA USAR EL ASIENTO DE SU CAMINADOR**

- Asegúrese de que su caminador esté en una superficie plana, no en una pendiente.
- BLOQUEE los frenos antes de sentarse.
- Asegúrese de que sus pies alcanzan el suelo.

## Cuidado y mantenimiento

### AJUSTE DE FRENO PERIÓDICO

#### Para ajustar la sensibilidad del freno:

- Para apretar el freno (reducir el espacio entre la pastilla de freno y la rueda), gire la tuerca de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.
- Para aflojar el freno (aumentar el espacio entre el freno y la rueda), gire la tuerca de ajuste hacia la izquierda.



#### ¡ATENCIÓN!

- El ajuste excesivo de frenos puede impedir que las ruedas se muevan libremente.
- El ajuste del freno puede hacer que la pastilla de freno no se acople en absoluto.
- NO UTILICE WALKER SI LOS FRENOS NO ESTÁN TRABAJANDO CORRECTAMENTE.

## Instrucciones de seguridad

**¡¡¡ATENCIÓN!!!**

**No seguir estas instrucciones de seguridad puede causar lesiones graves.**

### **TENGA CUIDADO DE NO INCLINAR HACIA ADELANTE SU COMODITÀ TIPO STAND UP WALKER.**

COMODITÀ está muy preocupada por la seguridad de nuestros productos. Por eso solo ofrecemos nuestro modelo Stand Up con ruedas ultra grandes con neumáticos.

Las ruedas delanteras de 12" con neumáticos le permitirán disfrutar de su andador en muchos terrenos diferentes con menos riesgo de vuelco.

- **¡No** camine demasiado rápido!
- **NO** use este producto como una silla de ruedas.
- **NO** transporte a alguien mientras está sentado en este caminador.
- **¡NO** empuje su COMODITÀ Tipo Stand Up cuando encuentre un obstáculo en el terreno! Da la vuelta al obstáculo. **Intentar superar un obstáculo con fuerza aumenta el riesgo de que el andador se vuelque.**
- **NO** exceda la capacidad máxima de peso.
- Los frenos **TIENEN** que estar en posición **BLOQUEADA** antes de sentarse en el asiento.
- **NO** propulsar el caminador mientras está sentado.
- **NO** se siente sobre el caminador en una pendiente.
- **INSPECCIONAR LOS FRENOS** antes de cada uso.
- **NO** utilice el caminador si los frenos no estén funcionando correctamente.
- **TODAS LAS RUEDAS DEBEN** estar en contacto con el suelo a todo momento.
- **EL RESPALDO NO** está diseñado para soportar todo su peso. Está diseñado para proporcionar apoyo a su espalda mientras está sentado.
- **NO** lo use en escaleras mecánicas, escaleras, aceras en movimiento o superficies irregulares.
- **AMBOS PIES** deben alcanzar el suelo cuando está sentado.
- **SIEMPRE** compruebe si el asiento está bloqueado y bien conectado al caminador cuando el rodillo está abierto.

## Garantía

Su caminador COMODITÀ está garantizado de estar libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra del propietario original. Esta garantía no cubre el fallo del dispositivo debido a negligencia del usuario, mal uso del producto, incumplimiento de las instrucciones o desgaste normal. En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, nosotros, a nuestra opción, repararemos o reemplazaremos el dispositivo. Esta garantía no incluye gastos de mano de obra ni gastos de envío. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en [info@comoditausea.com](mailto:info@comoditausea.com). Proporcionaremos un número de autorización de devolución. Se le pedirá que incluya una copia de su factura original de venta.





COMODITÀ

*Excellence in design and safety*

## COMODITÀ **Tipo** *stand up*

Compact upright rolling walker - model COM 930

Caminador vertical compacto con ruedas - modelo COM 930

Manufactured in China for:  
COMODITÀ LLC USA

[www.comoditusa.com](http://www.comoditusa.com)  
[info@comoditusa.com](mailto:info@comoditusa.com)